

HI97769

Fotómetro para Surfactantes Aniônicos



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Estimado
Cliente**

Obrigado por escolher um produto Hanna Instruments.

Por favor leia este Manual de Instruções cuidadosamente, antes de utilizar o instrumento.

Este manual fornece-lhe toda a informação necessária para que possa utilizar o instrumento corretamente, assim como uma ideia precisa da sua versatilidade.

Se necessitar de mais informações técnicas não hesite em nos contatar para assistencia@hanna.pt ou visite a nossa página www.hanna.pt

1. EXAME PRELIMINAR	4
2. MEDIDAS DE SEGURANÇA	5
3. ABREVIATURAS	5
4. ESPECIFICAÇÕES.....	6
5. DESCRIÇÃO	7
5.1. DESCRIÇÃO GERAL E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO.....	7
5.2. DESCRIÇÃO FUNCIONAL.....	8
5.3. PRECISÃO E EXATIDÃO	9
5.4. PRINCÍPIO DE OPERAÇÃO	9
5.5. SISTEMA ÓTICO	10
6. OPERAÇÕES GERAIS.....	11
6.1. VALIDAÇÃO DO MEDIDOR: CAL CHECK E CALIBRAÇÃO	11
6.2. GLP (BOAS PRÁTICAS LABORATORIAIS)	12
6.3. REGISTO E CONSULTA DE DADOS	13
6.4. DEFINIÇÕES GERAIS.....	13
6.5. REAGENTES E ACESSÓRIOS.....	14
6.6. AJUDA CONTEXTUAL.....	16
6.7. GESTÃO DA ENERGIA.....	17
7. FOTÓMETRO.....	18
7.1. USO ADEQUADO DO FRASCO CONTA-GOTAS.....	18
7.2. PREPARAÇÃO DA CUVETTE	18
8. PROCEDIMENTO DO MÉTODO	20
9. AVISOS E DESCRIÇÃO DE ERROS.....	24
10. SUBSTITUIÇÃO DE PILHAS.....	26
11. ACESSÓRIOS	27
11.1. CONJUNTOS DE REAGENTES	27
11.2. OUTROS ACESSÓRIOS	27
CERTIFICAÇÃO	28
RECOMENDAÇÕES PARA O UTILIZADOR.....	28
GARANTIA.....	29

1. EXAME PRELIMINAR

Retire o instrumento e acessórios da embalagem e examine-os cuidadosamente. Para obter assistência técnica, contate a Assistência Técnica Hanna Instruments ou envie um e-mail para assistencia@hanna.pt.

Cada **HI97769C** é fornecido numa mala de transporte que inclui:

- Cuvete de amostra (2 un.)
- Tampa para Cuvete de amostra (2 un.)
- Vedante plástico (2 un.)
- **A ZERO** - Cuvete CAL Check A
- **HI97769B** - Cuvete CAL Check B para Surfactantes Aniônicos
- Pano para limpeza de cuvetes
- Pilhas alcalinas de 1,5V AA
- Certificado de padrão CAL Check™
- Certificado de qualidade do instrumento
- Manual de instruções

Cada **HI97769** é fornecido numa embalagem de cartão com:

- Cuvete de amostra (2 un.)
- Tampa para Cuvete de amostra (2 un.)
- Vedante plástico (2 un.)
- Pilhas alcalinas de 1,5V AA
- Certificado de qualidade do instrumento
- Manual de instruções

Nota: Guarde todas as embalagens até ter a certeza de que o medidor funciona corretamente. Qualquer item danificado ou defeituoso deve ser devolvido na sua embalagem original, juntamente com os acessórios fornecidos.

2. MEDIDAS DE SEGURANÇA



- Os químicos contidos nos estojos de reagentes podem ser perigosos se impropriamente manuseados.
- Leia as Fichas de Dados de Segurança antes de realizar os testes.
- Equipamento de segurança: Utilize proteção ocular e vestuário de proteção, quando necessário, e siga as instruções atentamente.
- Derrame de reagentes: Se ocorrer um derrame de reagente, limpe imediatamente e enxague com bastante água. Se o reagente entrar em contacto com a pele, enxague bem a área afetada com água. Evite respirar os vapores emitidos.
- Eliminação de resíduos: Para uma correta eliminação dos estojos de reagentes e amostras reagidas, contacte uma empresa de tratamento de resíduos.

3. ABREVIACÕES

mg/l	miligramas por litro (ppm)
ml	mililitro
°C	graus Celsius
°F	graus Fahrenheit
EPA	Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América
BPL	Boas Práticas Laboratoriais
HDPE	Polietileno de alta densidade
LED	Díodo emissor de luz
NIST	National Institute of Standards and Technology

4. ESPECIFICAÇÕES

Surfactantes Aniónicos	Gama	0.00 a 3.50 mg/L (como SDBS)
	Resolução	0,01 mg/L
	Precisão	$\pm 0,04$ mg/L $\pm 3\%$ da leitura a 25 °C
	Método	Adaptação do Método EPA 425.1 US e do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20ª Edição, 5540C, Surfactantes Aniónicos como MBAS
Medição Sistema	Fonte de luz	Díodo emissor de luz
	Filtro de passagem de banda	610 nm
	Comprimento de onda do filtro de passagem de banda	8 nm
	Precisão do comprimento de onda do Filtro de passagem de banda	± 1.0 nm
	Detetor de luz	Fotocélula de silício
	Tipo de cuvete	Redonda com 24,6 mm de diâmetro (22 mm de diâmetro interno)
Especificações Adicionais	Registo automático	50 leituras
	Mostrador	LCD de 128 x 64 pixels com retroiluminação
	Desligar automático	Após 15 minutos de inatividade (30 minutos antes de uma medição READ)
	Tipo de pilha	Pilhas de 1,5 V AA (3 un.)
	Duração da pilha	> 800 medições (sem retroiluminação)
	Ambiente de utilização	0 a 50 °C (32 a 122 °F); 0 a 100% HR
	Dimensões	142,5 x 102,5 x 50,5 mm
	Peso (sem pilhas)	380 g
	Classificação da proteção de permeabilidade do corpo	Classificação IP67

5. DESCRIÇÃO

5.1. DESCRIÇÃO GERAL E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO

O **HI97769** é um medidor portátil com autodiagnóstico que beneficia dos anos de experiência da Hanna como fabricante de instrumentos analíticos. Possui um sistema ótico avançado que utiliza um díodo emissor de luz (LED) e um filtro de banda de estreita interferência que possibilita leituras precisas e repetíveis.

O sistema ótico está vedado contra a entrada de poeiras e água. O medidor utiliza um sistema de bloqueio positivo, de modo a assegurar que a cuvete se encontra na mesma posição cada vez que é inserida na célula de medição.

Com a função CAL Check, é possível validar o desempenho do instrumento a qualquer momento e aplicar uma calibração do utilizador (se necessário). As cvetes CAL Check da Hanna são produzidas com padrões rastreáveis NIST.

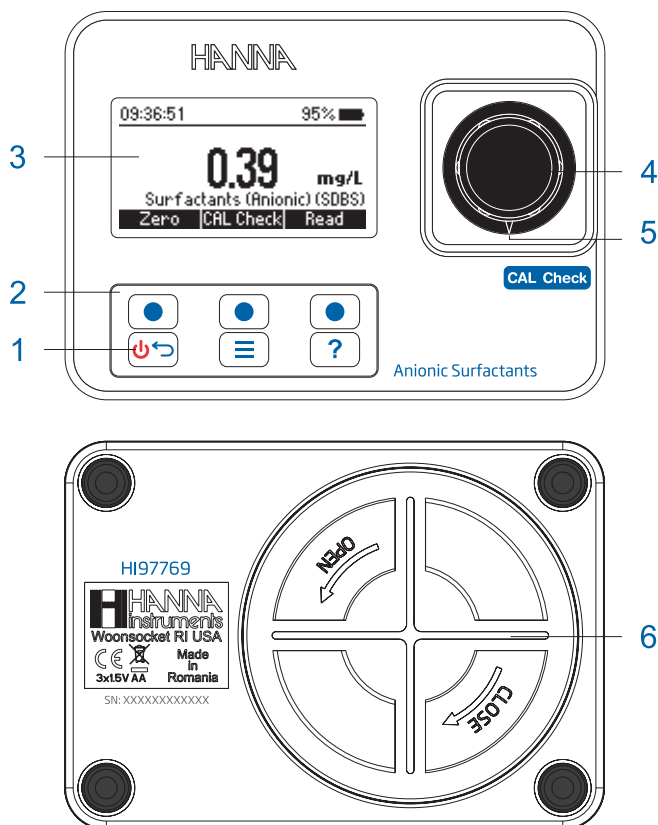
O modo Tutorial integrado guia o utilizador passo-a-passo através do processo de medição. Inclui todos os passos necessário para a preparação da amostra, os reagentes necessários e as quantidades.

O **HI97769** mede o conteúdo de surfactantes aniónicos em amostras de água, na gama de 0.00 a 3.50 mg/L (ppm). O método é uma adaptação do Método US EPA 425.1 e do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater", 20^ª Edição, 5540C, Surfactantes Aniónicos como MBAS.

O fotómetro **HI97769** é um medidor compacto e versátil adequado para medições em bancadas ou em campo, que integra:

- Sistema ótico avançado
- Validação do medidor através de cvetes CAL Check certificadas
- O modo Tutorial que guia o utilizador passo-a-passo
- Registo automático
- Proteção à água IP67
- Funções BPL





5.2. DESCRIÇÃO FUNCIONAL



1. Tecla ON/OFF 3. Mostrador (LCD) 5. Marca de indexação
 2. Teclado 4. Suporte de cuvete 6. Tampa do compartimento das pilhas

Descrição do Teclado

O teclado possui 3 teclas diretas e 3 teclas de função, com as seguintes funções:

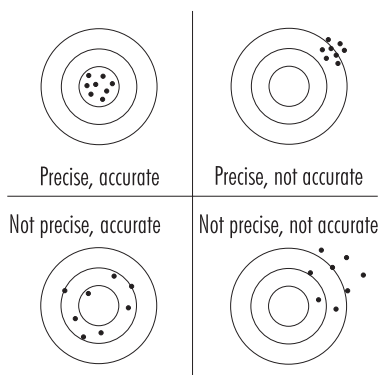
-  Prima a tecla de função para realizar a função indicada acima delas no LCD.
-  Prima e mantenha para desligar/ligar. Prima ESC para voltar ao ecrã anterior.
-  Prima para aceder ao ecrã de Menu.
-  Prima para apresentar o menu de ajuda contextual.

5.3. PRECISÃO E EXATIDÃO

Precisão é o quão perto concordam uma com a outra medições repetidas. A precisão é normalmente expressa como desvio padrão (SD).

A exatidão é definida como a maior proximidade de um teste ao valor verdadeiro.

Apesar de uma boa precisão sugerir uma boa exatidão, os valores precisos podem não ser exatos. A figura explica estas definições.



5.4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

A absorção de luz é um fenómeno típico da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. Quando um feixe de luz atravessa uma substância, alguma da radiação pode ser absorvida por átomos, moléculas ou cristais. A análise química fotométrica baseia-se em reações químicas específicas entre a amostra e reagente, para produzir um composto absorvente de luz.

Se ocorrer a absorção pura, a fração de luz absorvida depende do comprimento da distância ótica, através da matéria e das características físico-químicas da substância, de acordo com a Lei Lambert-Beer. Se todos os outros fatores forem constantes, a concentração "c" pode ser calculada a partir da absorvância da substância.

Lei Lambert-Beer:

$$- \text{Registo } I/I_0 = \epsilon_{\lambda} c d$$

ou

$$A = \epsilon_{\lambda} c d$$

I_0 = intensidade da incidência do feixe de luz

I = intensidade do feixe de luz após a absorção

ϵ_{λ} = coeficiente de extinção molar no comprimento de onda λ

c = concentração molar da substância

d = caminho ótico através da substância

5.5. SISTEMA ÓTICO

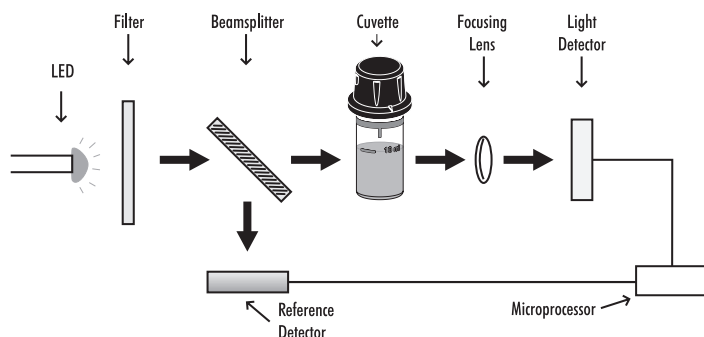


Diagrama de bloco do instrumento

O sistema de referência interna (detetor de referência) do fotômetro [HI97769](#) compensa quaisquer derivações devidas a flutuações de energia ou alterações da temperatura ambiente, oferecendo uma fonte de luz estável para a medição de branco (zero) e medição da amostra.

Uma fonte de luz LED oferece um desempenho superior em comparação com uma lâmpada de tungstênio. Os LEDs possuem uma eficiência luminosa muito superior, oferecendo mais luz e consumindo menos energia. Também produzem muito pouco calor, o que, de outro modo, poderia afetar a estabilidade eletrônica. Os LEDs estão disponíveis em vários comprimentos de onda, enquanto que as lâmpadas de tungstênio possuem pouca emissão de luz azul/violeta.

Os filtros óticos melhorados asseguram uma maior precisão do comprimento de onda e permitem a recepção de um sinal mais luminoso e mais forte. O resultado final é uma maior estabilidade da medição e um menor erro do comprimento de onda.

Uma lente de focagem recolhe toda a luz que sai da cuvete, eliminando erros devidos a imperfeições ou riscos na cuvete, eliminando a necessidade de indexar a cuvete.

6. OPERAÇÕES GERAIS

6.1. VALIDAÇÃO DO MEDIDOR: CAL CHECK E CALIBRAÇÃO

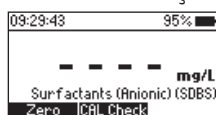
A validação do **HI97769** inclui a verificação da concentração dos padrões CAL Check certificados. O ecrã CAL Check guia o utilizador passo-a-passo através do processo de validação e da calibração do utilizador (se necessário).

AVISO: Não utilize quaisquer outros reagentes /soluções que não os padrões CAL Check da Hanna Instruments®. Para resultados de calibração e de validação precisos, realize os testes à temperatura ambiente, 18 a 25 °C (64.5 to 77.0 °F).



Nota: Os padrões CAL Check não leem um valor especificado no modo de medição. Proteja as cuvetes CAL Check da luz solar direta, mantendo-as na sua embalagem original. Armazene-as entre 5 e 30 °C (41 a 86 °F), não as congele.


Para realizar uma verificação CAL Check:

1. Prima a **CAL Check** durante o modo de medição.



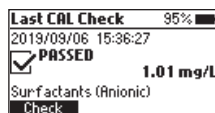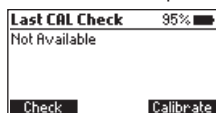A mensagem "Not Available" (Não disponível) ou a data/hora e estado da última verificação CAL Check serão apresentadas no ecrã.




2. Prima **Check** para iniciar uma nova verificação CAL Check. Prima a tecla  a qualquer momento para cancelar o processo de validação.
3. Use as teclas de função para introduzir o valor certificado do padrão de calibração que se encontra no Certificado de padrão CAL Check. Prima **Next** (Seguinte) para continuar.




Nota: Este valor será guardado no instrumento para validação futura. Se adquiriu um novo conjunto de padrões de calibração, atualize o valor certificado.

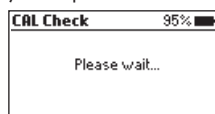
4. Insira a Cuvete CAL Check **A ZERO** e, em seguida, prima **Next** para continuar. A mensagem "Please wait..." (Aguarde) será apresentada durante a medição.





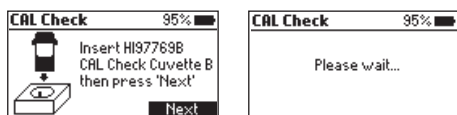
- Insira a Cuvete CAL Check B **HI97769B** e, em seguida, prima **Next** para continuar. A mensagem "Please wait..." (Aguarde) será apresentada durante a medição.



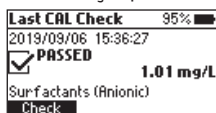
- Quando a verificação CAL Check está concluída, o ecrã apresenta uma das seguintes mensagens e o valor obtido durante a medição:
 - "**PASSED**": O valor medido encontra-se dentro das especificações de precisão, não é necessária calibração pelo utilizador.



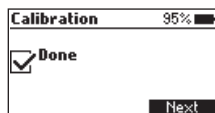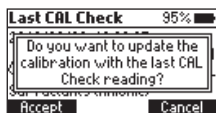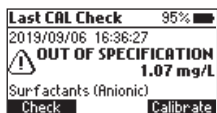
- "**OUT OF SPECIFICATION**" (Fora das especificações) e **Calibration** (Calibração) disponível: O valor medido está próximo do valor esperado. Para atualizar a calibração pelo utilizador, prima **Calibrate** (Calibrar). Prima **Accept** (Aceitar) para confirmar ou **Cancel** (Cancelar) para voltar ao ecrã anterior.




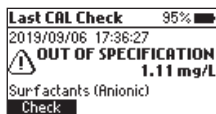- "**OUT OF SPECIFICATION**": Não é permitida uma calibração pelo utilizador, o valor medido encontra-se fora dos limites de tolerância. Verifique o valor certificado, data de validade e limpe o exterior da cuvette. Repita o procedimento de CAL Check. Se este erro persistir, contate a Assistência Técnica Hanna.



6.2. GLP

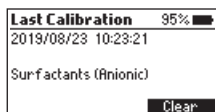
Prima a tecla  para entrar no menu. Use as teclas de função para selecionar GLP (BPL) e prima **Select** (Selecionar). As boas práticas laboratoriais (BPL) apresentam a data e hora da última calibração realizada pelo utilizador (se disponível) ou em fábrica. Para apagar a última calibração do utilizador e eliminar a verificação CAL Check, prima **Clear** (Apagar) e siga as indicações. Prima **Yes** (Sim) para apagar e voltar aos dados de calibração de fábrica ou **No** (Não) para sair do procedimento de eliminação.




6.3. REGISTO DE DADOS E CONSULTA DE DADOS



O instrumento possui uma função automática de registo de dados que ajuda a rastrear todas as medições. Cada vez que é realizada uma medição, os dados são automaticamente guardados. O registo de dados pode suportar até 50 medições individuais. Quando são atingidas as 50 medições, o medidor escreve por cima do registo mais antigo.

É possível visualizar e eliminar dados utilizando o menu **Log Recall** (Consulta).


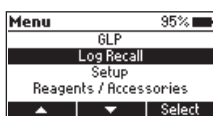
Prima a tecla  para entrar no menu. Utilize as teclas de função para seleccionar **Log Recall** (Consulta) e prima **Select** (Selecionar).



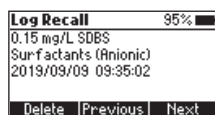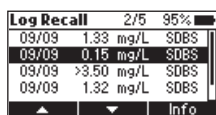Utilize as teclas de função para seleccionar um registo e prima **Info** para visualizar informação adicional do registo. Neste ecrã, **Next** (Seguinte) e **Previous** (Anterior) podem ser utilizadas para visualizar outros registos.



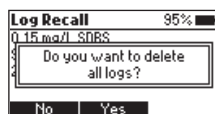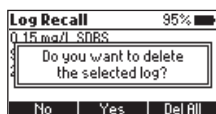
Prima **Delete** (Eliminar) para eliminar os dados registados. Após premir **Delete** (Eliminar), é pedida a confirmação do utilizador.




Prima a tecla **No** (Não) ou a tecla  para voltar ao ecrã anterior.

Prima **Yes** (Sim) para apagar o registo seleccionado.


Prima **Del All** (Elim tudo) para eliminar todos os dados registados. Se é premido **Del All** (Elim tudo), siga o aviso no ecrã para confirmar. Prima **Yes** (Sim) para eliminar todos os dados registados, **No** (Não) ou a tecla  para voltar à consulta.

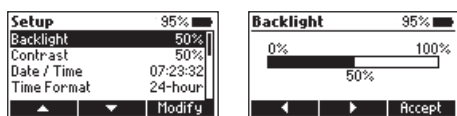
6.4. CONFIGURAÇÃO GERAL

Prima a tecla  para entrar no menu. Use as teclas de função para selecionar Setup (Definições) e prima **Select** (Selecionar). Use as teclas de função para selecionar a opção pretendida.

Retroiluminação


Opção: 0 a 100 %


Prima a tecla **Modify** para aceder à intensidade da retroiluminação. Utilize as teclas de função para aumentar ou diminuir o valor. Prima a tecla **Accept** (Aceitar) para confirmar ou a tecla  para voltar ao menu Setup (Definições) sem guardar o novo valor.



Contraste

Opção: 0 a 100 %

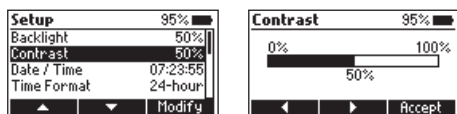Prima **Modify** para alterar o contraste do mostrador. Utilize as teclas de função para aumentar ou diminuir o valor. Prima a tecla **Accept** (Aceitar) para confirmar o valor ou a tecla  para voltar ao menu Setup (Definições) sem guardar o novo valor.



Data e Hora

Prima a tecla **Modify** para alterar a data/hora. Prima as teclas de função para selecionar o valor a ser modificado (ano, mês, dia, hora, minuto ou segundo). Prima **Edit** (Editar) para modificar o valor selecionado. Utilize as teclas de função para alterar o valor.

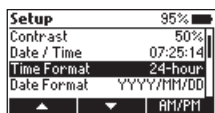
Prima **Accept** para confirmar ou a tecla  para regressar ao ecrã anterior.




Formato de hora


Opção: AM/PM ou 24 horas

Prima a tecla funcional para selecionar o formato de hora desejado.



Formato de data

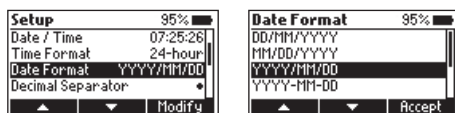
Prima a tecla **Modify** para alterar o formato da data. Utilize as teclas de função para selecionar o formato desejado. Prima a tecla **Accept** (Aceitar) para confirmar ou a tecla  para voltar ao menu Setup (Definições) sem guardar o novo formato.



Separador decimal

Opção: Vírgula (,) ou Ponto final (.)

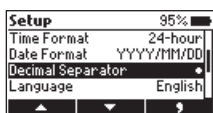Prima a tecla de função para selecionar o separador decimal desejado. O separador decimal é utilizado no ecrã de medição.



Idioma

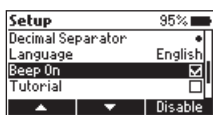
Prima a tecla **Modify** para alterar o idioma. Utilize as teclas de função para selecionar o idioma desejado. Prima **Accept** (Aceitar) para escolher um dos idiomas instalados.



Sinal sonoro

Opção: Ativar ou Desativar


Se ativo, é emitido um sinal sonoro cada vez que é premida uma tecla. Um sinal sonoro longo alerta que a tecla pressionada não está ativa ou que foi detetada uma condição de erro. Prima a tecla funcional para ativar ou desativar o sinal sonoro.




Tutorial


Opção: Ativar ou Desativar

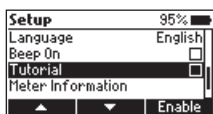Quando ativado, o utilizador será guiado passo a passo através do procedimento de medição.




Informação do medidor

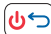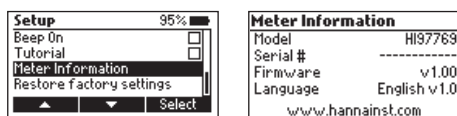Prima **Select** (Selecionar) para ver o modelo, número de série, versão de firmware e idioma selecionado. Prima a tecla  para regressar ao menu Setup (Definições).






Restaurar as definições de fábrica

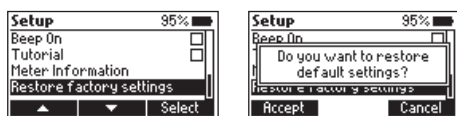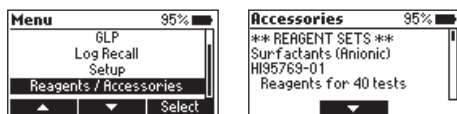Prima **Select** (Selecionar) para a repor as predefinições de fábrica. Prima **Accept** (Aceitar) para confirmar ou **ESC** (Sair) para sair sem repor predefinições.




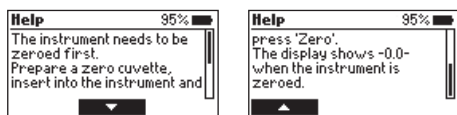
6.5. REAGENTES E ACESSÓRIOS



Prima a tecla  para entrar no menu. Utilize as teclas de função para selecionar Reagents/ Accessories (Reagentes/ Acessórios) e prima **Select** (Selecionar) para aceder a uma lista de reagentes e acessórios. Para sair, prima a tecla .



6.6. AJUDA CONTEXTUAL

O HI97769 possui um modo de ajuda contextual interativa que ajuda o utilizador em qualquer momento. Para regressar ao ecrã Ajuda, prima a tecla .

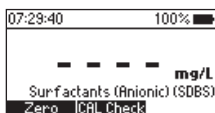


O instrumento apresenta a informação adicional relacionada com o ecrã atual. Para ler toda a informação disponível, navegue pelo texto usando as teclas de função. Para sair do modo de ajuda, prima a tecla  ou a tecla  e o medidor volta ao ecrã anterior.


6.7. GESTÃO DA ENERGIA

O medidor realiza um teste de autodiagnóstico quando é ligado pela vez. Durante este teste, aparece o logo Hanna Instruments® no ecrã. Se o teste de autodiagnóstico foi bem sucedido, o medidor está pronto a ser utilizado. O ícone apresentado no LCD indica a carga das pilhas:


- carga total



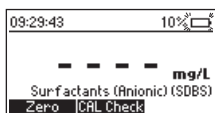- carga abaixo de 10%, substitua as pilhas a breve



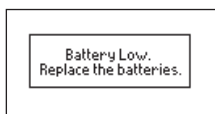- a carga está a esgotar, substitua as pilhas por novas.




Para preservar a bateria, o medidor desliga-se automaticamente após 15 minutos de inatividade. Se foi realizada uma leitura zero, mas não uma medição, o tempo até se desligar automaticamente aumenta para 30 minutos.

7. FOTÓMETRO

7.1. Uso adequado do frasco conta-gotas

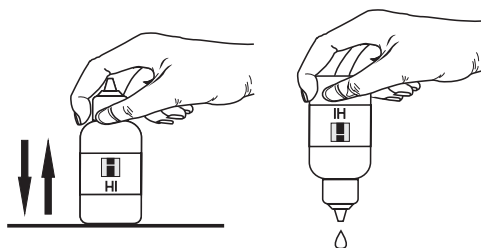1. Bata com o conta-gotas várias vezes na mesa e limpe o exterior do doseador com um pano.
2. Enquanto doseia o reagente, mantenha o frasco conta-gotas sempre numa posição vertical.




7.2. PREPARAÇÃO DA CUVETE


Para medições reproduzíveis, é muito importante uma mistura correta. A técnica de mistura apropriada é indicada no procedimento do método.

- (a) Inverta a cuvete de vidro um par de vezes ou durante um tempo especificado: mantenha a cuvete na posição vertical. Vire a cuvete de cima para baixo e aguarde que toda a solução flua até à tampa, depois volte a cuvete na posição vertical e aguarde que toda a solução flua para o fundo da cuvete. Isto é uma inversão. A velocidade correta para esta técnica de mistura é 10 a 15 inversões completas em 30 segundos. Esta técnica de mistura é indicada com "invert to mix" (inverta para misturar) e com o seguinte ícone:



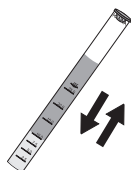
- (b) O método de mistura é indicado com "shake vigorously" (agite vigorosamente) usando um dos seguintes ícones:



De modo a evitar o derrame do reagente e obter medições mais precisas, primeiro feche a cuvete com a tampa plástica HDPE fornecida  e depois com a tampa exterior preta.



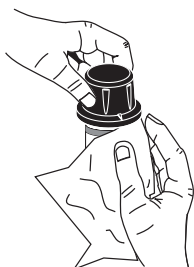Sempre que a cuvete é colocada no suporte de medição, deve estar seca exteriormente e livre de impressões digitais, gordura ou sujidade. Limpe-a bem antes da inserção com o [HI731318](#) um pano de limpeza em microfibra ou um pano sem pelos.



Agitar a cuvete pode gerar bolhas na amostra, provocando leituras mais elevadas. Para obter resultados precisos, remova tais bolhas agitando circularmente ou batendo cuidadosamente na cuvete.

Não deixe que amostra reagida repouse muito tempo após a adição de reagente. Para uma maior precisão, respeite os tempos descritos em cada método.

É possível realizar múltiplas leituras seguidas, mas recomenda-se que faça uma nova leitura zero para cada amostra e que utilize a mesma cuvete para o zero e para a medição, sempre que possível.

Deite a amostra fora imediatamente após realizar a leitura, ou o vidro pode ficar permanentemente manchado.

Todos os tempos de reação indicados neste manual são a 25 °C (77 °F). Modo geral, o tempo de reação deve ser aumentado para temperaturas abaixo de 20 °C (68 °F) e diminuído para temperatura superiores a 25 °C (77 °F).

8. PROCEDIMENTO DO MÉTODO

REAGENTES NECESSÁRIOS

Código	Descrição	Quantidade
HI95769A-0	Reagente de Surfactantes Aniônicos A	4 gotas
HI95769B-0	Reagente de Surfactantes Aniônicos B	2 gotas
-	Reagente de Clorofórmio	10 ml
DEIONIZED120	Água Desionizada	15 ml

CONJUNTOS DE REAGENTES

HI95769-01 Reagente de Surfactantes Aniônicos - 40 testes

Para ver acessórios adicionais, consulte a seção ACESSÓRIOS.

PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO

Nota: Se o modo tutorial está desativado, siga o procedimento de medição apresentado abaixo. Se o modo tutorial está ativado, prima **Measure** (Medição) e siga as mensagens apresentadas no ecrã.

- Encha a cuvete de vidro graduada com 25 ml de amostra.

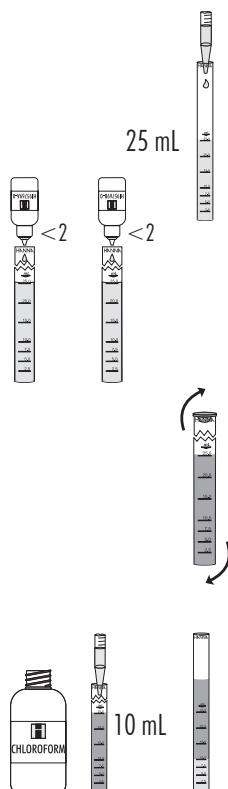
Nota: Para uma maior precisão, recomenda-se a utilização de pipetas de laboratório de classe A.

- Adicione 2 gotas de Reagente de Surfactantes Aniônicos A HI95769A-0 e 2 gotas de Reagente de Surfactantes Aniônicos B HI95769B-0.


- Volte a colocar tampa e inverta para misturar, a solução torna-se azul.

- Adicione 10 ml de Clorofórmio.

Nota: O clorofórmio é mais denso do que a água e deposita-se no fundo do cilindro de vidro.




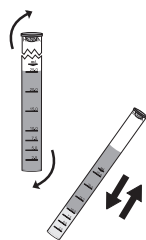- Inverta a cuvete duas vezes e remova a tampa para soltar qualquer pressão que se tenha formado.
- Volte a colocar a tampa e agite vigorosamente durante cerca de 30 segundos.




Nota: Assegure-se que a tampa está bem apertada antes de agitar.

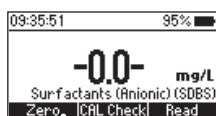
- Prima **Zero** e o mostrador indica uma contagem decrescente de 2 minutos. Para ignorar o temporizador, prima **Zero** duas vezes. Para interromper o temporizador prima **Stop** para iniciar a contagem de 2 minutos, prima **2:00 min**. Durante este período, a camada de clorofórmio separa-se da camada aquosa, a cor da camada aquosa desvanece ligeiramente, enquanto a camada de clorofórmio torna-se azul.



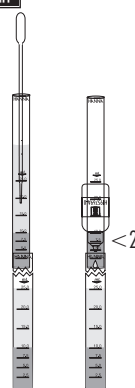- Remova a tampa.
- Remova a camada aquosa superior usando a pipeta plástica comprida, não remova a camada inferior de clorofórmio.
- Adicione 15 ml de água desionizada à cuvete (até à marca de 25 ml).
- Adicione 2 gotas de **HI95769A-0** Reagente de Surfactantes Aniônicos A.



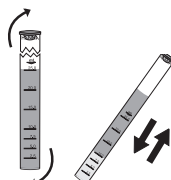- Inverta a cuvete duas vezes e remova a tampa para soltar qualquer pressão que se tenha formado.
- Volte a colocar a tampa e agite vigorosamente durante cerca de 30 segundos.




Nota: Assegure-se que a tampa está bem apertada antes de agitar.

- Prima **Start** (Iniciar) e o mostrador indica uma contagem decrescente de 2 minutos. Para ignorar o temporizador prima **Zero**. Para interromper o temporizador prima **Stop**. Durante este período, a camada de clorofórmio separa-se da camada aquosa.



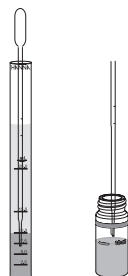- Remova a tampa.
- Insira uma pipeta plástica limpa por baixo da camada aquosa superior para transferir a camada inferior de clorofórmio para uma cuvete. Não transfira nenhuma camada aquosa superior.



Notas: A solução na cuvete deve ser límpida. Se a solução está turva, a separação entre o clorofórmio e a camada aquosa pode ser melhorada aquecendo cuidadosamente a cuvete (mantendo a cuvete na mão). Se a camada de clorofórmio contém algumas gotas aquosas presas na parede da cuvete, agite em círculos cuidadosamente ou inverta a cuvete. É importante transferir pelo menos 7 ml da camada de clorofórmio para a cuvete de medição, até 0.5 cm abaixo da marca de 10 ml. Se o volume transferido é inferior a 7 ml, a precisão do teste pode ser afetada. Por favor repita o teste esperando mais do que 2 minutos para permitir a separação completa entre as duas fases.

- Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Esta é a amostra reagida (#2).




#2 amostra

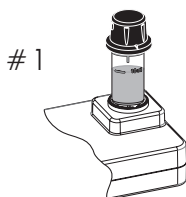- Encha uma cuvete com 10 ml de Reagente de Clorofórmio (até à marca). Volte a colocar o vedante plástico e a tampa. Este é o branco (#1)






#1 branco


- Insira o branco (cuvete #1) no suporte e assegure-se que o entalhe na tampa está posicionado com segurança no ranhura.



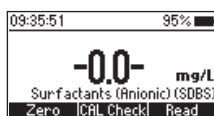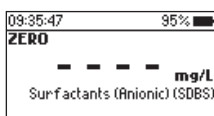
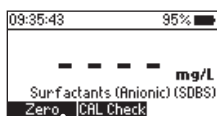
- Prima **Zero**. O mostrador indicará "-0.0-" quando o medidor está a zero e pronto para a medição.



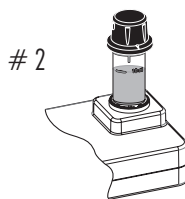- Retire a cuvete.
- Insira a amostra reagida (#2) no suporte e assegure-se que o entalhe na tampa está posicionado com segurança na ranhura.



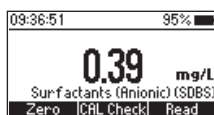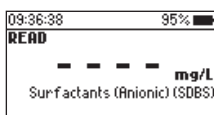- Prima **Read** para iniciar a leitura. O instrumento indica os resultados em mg/l como SDBS.



INTERFERÊNCIAS

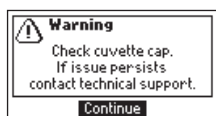
As interferências podem ser causadas por:

- A Absorção de partículas em suspensão, surfactantes catiónicos, oxidantes fortes (Cl_2 , H_2O_2 , $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ etc.) e sulfeto causam interferência negativa
- Os sulfatos orgânicos, sulfonatos provocam interferência positiva
- As amostras altamente tamponizadas ou com pH extremo podem exceder a capacidade tampão do reagente, o pH deve ser ajustado entre 4 e 9 com NaOH ou HCl diluído antes de adicionar o reagente


9. AVISOS E DESCRIÇÃO ERROS

O instrumento fornece mensagens de aviso claras quando aparecem condições errôneas e quando os valores medidos se encontram fora da gama esperada.


A informação abaixo apresentada, descreve os erros e avisos e as ações recomendadas.



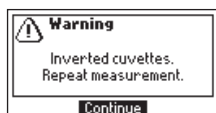O detetor obtém uma quantidade excessiva de luz ambiente. Assegure-se que o entalhe na tampa está posicionado com segurança na ranhura. Se o problema persistir, contate a Assistência Técnica Hanna Instruments.



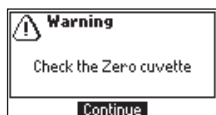As cuvetes de amostra e de zero estão invertidas. Troque as cuvetes e repita a medição.




Existe demasiada luz ou o instrumento não consegue ajustar o nível de luz. Verifique a preparação da cuvette de zero e que a amostra não contém resíduos.



O medidor está a sobreaquecer ou a sua temperatura baixou demasiado para funcionar dentro das especificações de precisão. O medidor deverá estar entre 0 e 50 °C (32 e 122 °F) para realizar qualquer medição.



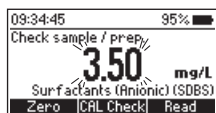
A temperatura do medidor mudou significativamente desde que a medição zero foi realizada. Deve ser realizada novamente uma medição zero.




O valor medido está fora dos limites do método. Verifique se a amostra não contém quaisquer depósitos. Verifique o procedimento de preparação da amostra e de medição.



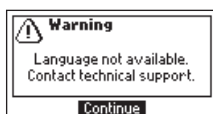
Perderam-se as configurações de data e hora. Faça uma reposição dos valores. Se o problema persistir, contate a Assistência Técnica Hanna Instruments.



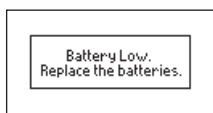
O único idioma disponível é Inglês. A função de ajuda não está disponível. Reinicie o medidor. Se o problema persistir, contate a Assistência Técnica Hanna Instruments.



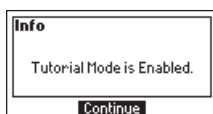O nível da bateria está demasiado baixo para que o medidor funcione corretamente. Substitua as pilhas por novas.



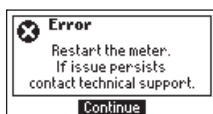O modo tutorial foi ativado no menu Definições. Prima **Continue** e siga os avisos no ecrã. O modo Tutorial pode ser desativado no menu Definições.



Ocorreu um erro crítico. Reinicie o medidor. Se o problema persistir, contate a Assistência Técnica Hanna Instruments.

11. ACESSÓRIOS

11.1. CONJUNTOS DE REAGENTES

Código	Descrição
HI95769-01	Reagente de Surfactantes Aniônicos - 40 testes

11.2. OUTROS ACESSÓRIOS

Código	Descrição
HI7101412	Mala de transporte para fotômetros HI977xx e 2 cuvetes CAL Check
HI731318	Pano para limpeza de cuvetes (4 un.)
HI731331	Cuvete em vidro (4 un.)
HI731336N	Tampas para cuvete (4 un.)
HI740220	Cuvete em vidro graduada de 25 ml (2 un.)
HI93703-50	Solução de limpeza para cuvetes (230 ml)
HI97769-11	Conjunto de cuvetes CAL Check [®] para Surfactantes Aniônicos

CERTIFICAÇÃO

Todos os produtos Hanna Instruments estão em conformidade com as **Diretivas CE**.



Eliminação de equipamentos elétricos e eletrónicos. O produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Deve ser reencaminhado para reciclagem no centro de tratamento de resíduos adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos.

Eliminação de resíduos de pilhas. Este produto contém pilhas, não as elimine juntamente com outros resíduos domésticos. Reencaminhe-as para o centro de tratamento de resíduos apropriado para reciclagem.

A correta eliminação do produto e das pilhas previne potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde pública. Para obter mais informações, contate o centro de tratamento de resíduos da sua área, o local de compra ou vá até www.hanna.pt.



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar este produto, certifique-se da sua total adequação à sua aplicação específica e no ambiente em o vai utilizar. Qualquer alteração a estes instrumentos introduzida pelo utilizador pode resultar na degradação do desempenho EMC do medidor. Para sua segurança e do medidor, não utilize nem armazene o medidor em ambientes perigosos.

GARANTIA

O HI97769 possui dois anos de garantia contra defeitos de fabricação na manufatura e em materiais quando utilizado no âmbito das suas funções e manuseado de acordo com as suas instruções. Esta garantia é limitada à reparação ou substituição gratuita do instrumento. Os danos resultantes de acidentes, uso indevido, adulteração ou falta de manutenção recomendada não estão cobertos pela garantia.

Caso seja necessária assistência técnica, contate a Hanna Instruments. Se em garantia, indique o número do modelo, data de aquisição, número de série (inscrito na parte de baixo do medidor) e a natureza do problema. Se a reparação não se encontrar ao abrigo da garantia, será notificado dos custos decorrentes. Caso pretenda enviar o medidor à Hanna Instruments, obtenha primeiro uma autorização (RGA) junto do Departamento de Apoio a Clientes. Proceda depois ao envio, com todos os portes pagos. Quando expedir qualquer medidor, certifique-se que está corretamente embalado e bem acondicionado e protegido.

A Hanna Instruments reserva-se o direito de modificar o design, construção e aparência dos seus produtos sem aviso prévio.

Contatos

Hanna Instruments Portugal Lda.
Zona Industrial de Amorim
Rua Manuel Dias, Nº 392, Fração I
4495 - 129 Amorim - Póvoa de Varzim
www.hanna.pt